



V8v

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ICU КРОВАТЬ



SAIKANG / Medical

Оздоровим
вашу жизнь

V8v

ОСОБЕННОСТИ



Технические параметры

▪ Габариты (Д*Ш)	2085x1025 mm
▪ Платформа матраса	1925x900 mm
▪ Макс. Нагрузка	250 kg
▪ Регулировка высоты	455-745 mm
▪ Регулировка спинки	0-75° (±5°)
▪ Регулировка наколенника	0-32° (±5°)
▪ Обратный Тренделенбург	0-12°
▪ Тренделенбург	0-12°
▪ Указатель угла	0-90°
▪ Авторегрессия	100+90 mm
▪ Линия положения	30°

Техническая фигурация

<input checked="" type="checkbox"/> Линейный мотор	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Подвижный пульт управления	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> 5" Двухсторонние колеса с центральным управлением	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Боковые задержания с дополнительной высотой из полипропилена	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> PP изножье с замком и бамперными колесами Ф65	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Платформа кровати из полипропилена со встроенным фиксатором матраса	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Запатентованный индикатор угла наклона спинки и положения Тренделенбурга	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> 4-крюковая стойка для капельницы	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Резервное отверстие для стойки капельницы	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Крюк для дренажного пакета	2 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Педаль для центрального управления колес	2 шт.

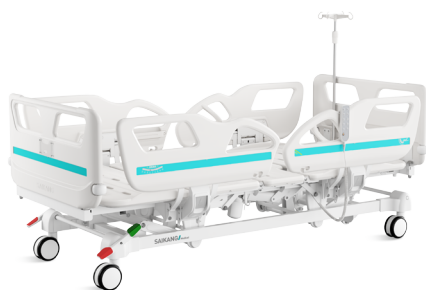
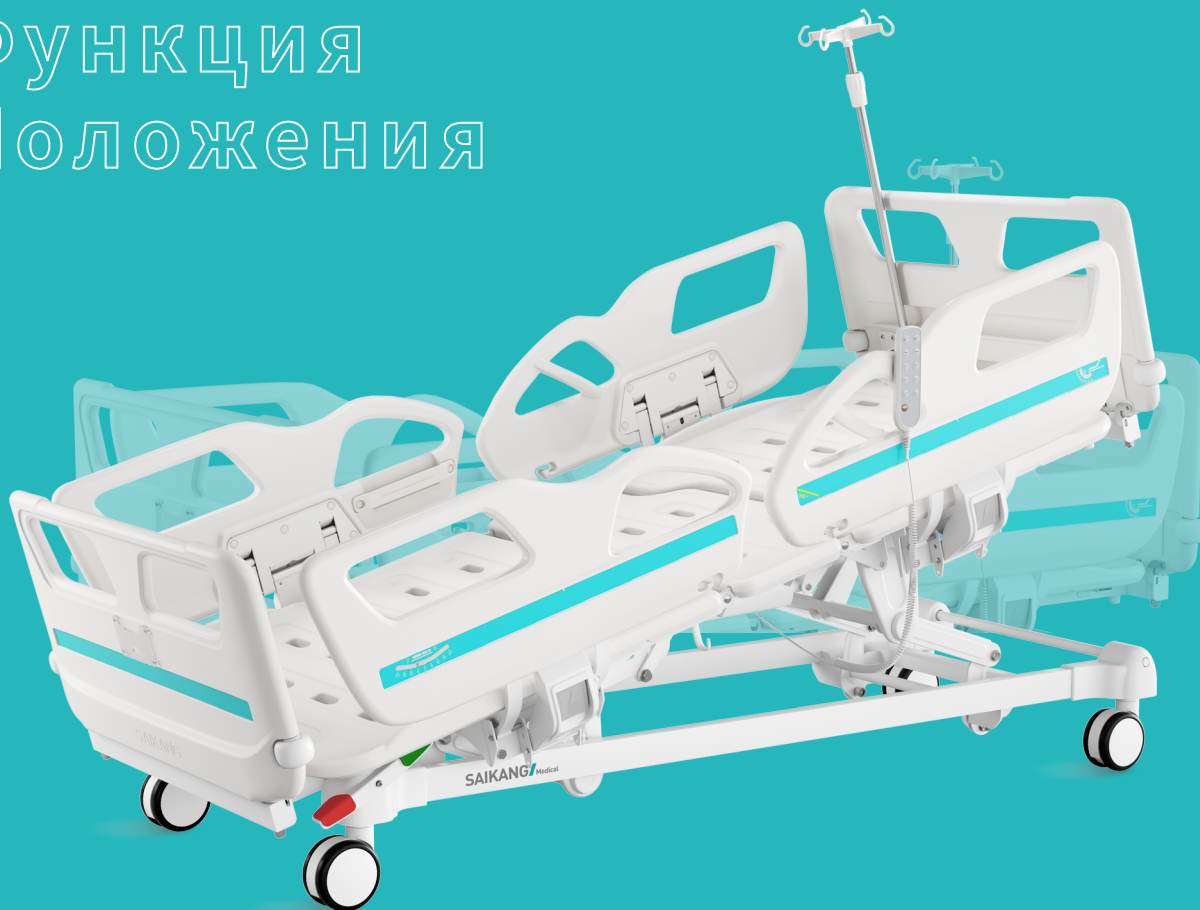
Опция

<input type="checkbox"/> Аккумулятор
<input type="checkbox"/> Возможно удлинения платформа кровати
<input type="checkbox"/> Пульт управления встроен в боковых заграждениях
<input type="checkbox"/> Система взвешивания
<input type="checkbox"/> Пульт для персонала
<input type="checkbox"/> Положение кардиологического кресла
<input type="checkbox"/> Указание положение спинной секции на 30 градусов и остановится
<input type="checkbox"/> Кнопка аварийной остановки
<input type="checkbox"/> Функция направляющих Колес
<input type="checkbox"/> Ночная лампа
<input type="checkbox"/> Вручная CPR
<input type="checkbox"/> Рентгенопроницаемый каркас (спинная секция)
<input type="checkbox"/> Полка для предметов
<input type="checkbox"/> Дуга вытягивания

Цвет по заказу (Мин. Кол. 100 шт.)

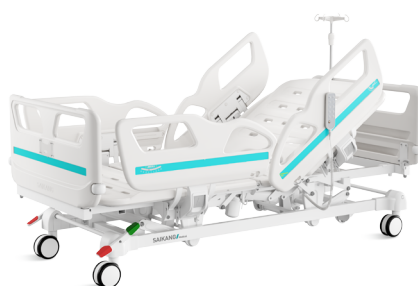


Функция Положения



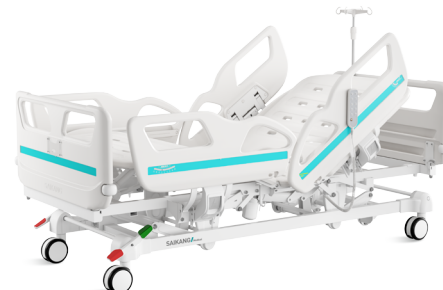
Макс. Нагрузка

250_{kg}



Регулировка спинки

75°



Регулировка наколенника

32°



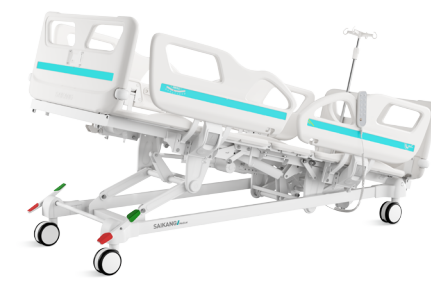
Регулировка высоты

455-745_{mm}



Обратный Тренделенбург

12°



Тренделенбург

12°

Контроль качества

Компания SAIKANG медико являясь пионером в направлении медицинских мебели. Для обеспечения безопасности и надежности своей продукции, SAIKANG всегда строго выбирает фирменных поставщиков и применяется ботизированную сварку, автоматическое эпоксидное покрытие, эффективную сборочную линию выделенными операторами -- все только для гарантии качества SAIKANG.



Дизайн

Уникальная конструкция, не содержащая микробов, соответствует строгим требованиям больниц к инфекционному контролю. Бесшовные полипропиленовые изголовье изголовья и изножья, обеспечивают мгновенную и достаточную стерилизацию.



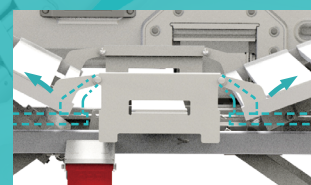
Сталь | Сварка

Baosteel, одна из 500 крупнейших компаний мира. Автоматическая сварка гарантирует полные плавные сварки.



Пластические части | Покраска

Экологический пластик можно стерилизовать при температуре 100 ° C, прочность на растяжение до 30 Мпа. Процедур порошкового крашения состоит из 11 этапов, толщина напыления 0,12 мм, яркость 60°, ударпрочность 50 кг.



Авторегрессия (Спинная секция)

Авторегрессия 10 см. При изменении положения спинки и ножной секции, каркас спинной части возвращает на заднюю сторону на 10 см, чтобы свести к минимуму давление и силы сдвига в области таза пациента. Это приводит к значительному уменьшению развития пролежней.



Мотор

Двигатель в соответствии со стандартами UL / ROHS / EN. Уровень Шума Менее 50 дБ, сроки службы : 20 000 Разовых движений.



Опорный рычаг

Однократно оформованный холоднокатанный лист толщиной 5,0 мм.

Аксессуары



Каркас

Интегрированная платформа кровати P P, использующая передовые технологии производства.

платформа 4-5 секций, обеспечивает независимую установку и простое обслуживание.

Увеличенная площадь сиденья при поднятия задней части, обеспечивая больше комфорта для пациентов.

Уменьшить вдавливание губки в панель сиденья.



Калесо

5" боковые колеса с центральным замком. TPR материал, проход на 10 км без износа, корпус колеса с защитой от намотки, без винта, прецизионная конструкция

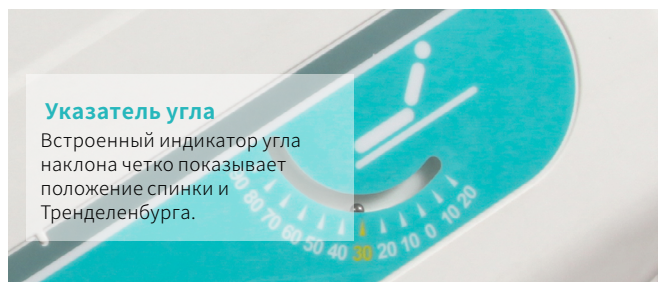
Нагрузка 200 кг, столкновение с препятствиями 40000 раз без деформации или повреждений.

Изголовье и изножье

Материал LG Chem fresh PP, вставляемый тип. Оснащен бамперным колесом диаметром 65 мм, предотвращающим столкновение.

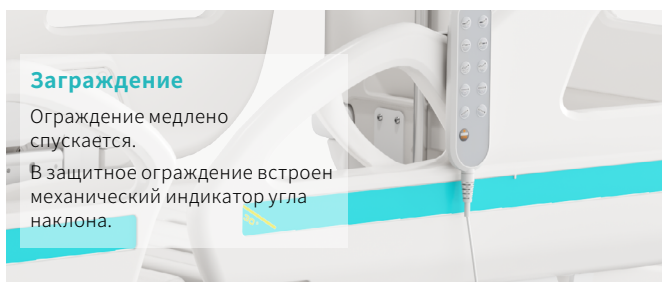
**Указатель угла**

Встроенный индикатор угла наклона четко показывает положение спинки и Тренделенбурга.

**Заграждение**

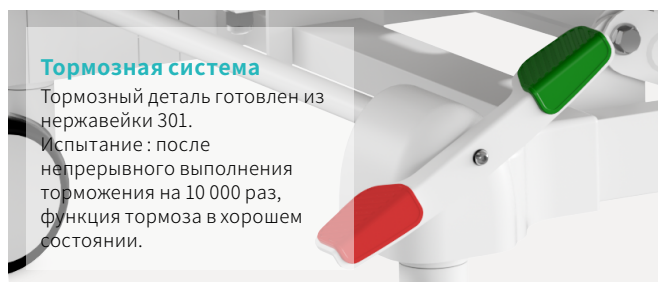
Ограждение медленно спускается.

В защитное ограждение встроен механический индикатор угла наклона.

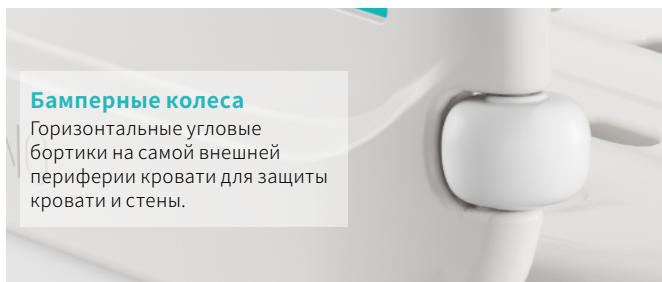
**Тормозная система**

Тормозная деталь изготовлена из нержавеющей стали 301.

Испытание: после непрерывного выполнения торможения на 10 000 раз, функция тормоза в хорошем состоянии.

**Бамперные колеса**

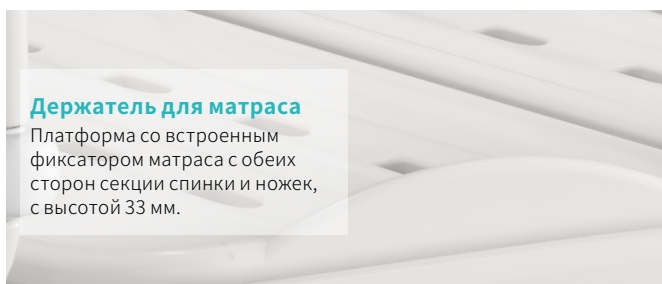
Горизонтальные угловые бортики на самой внешней периферии кровати для защиты кровати и стены.

**Ручной контроллер**

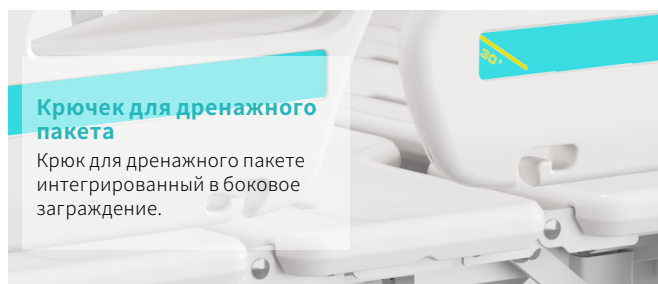
Гибкий спиральный кабель для удобства перемещения и работы в оптимальном положении. Медсестра может управлять всеми стандартными функциями.

**Держатель для матраса**

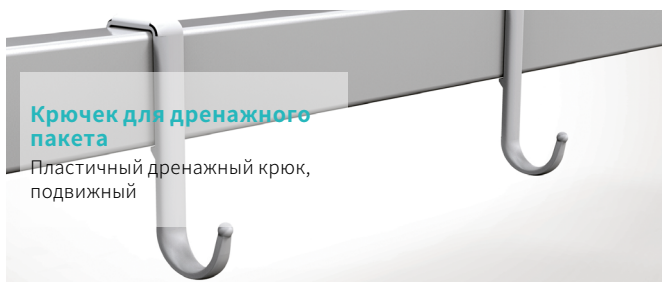
Платформа со встроенным фиксатором матраса с обеих сторон секции спинки и ножек, с высотой 33 мм.

**Крючок для дренажного пакета**

Крюк для дренажного пакета интегрированный в боковое ограждение.

**Крючок для дренажного пакета**

Пластичный дренажный крюк, подвижный

**Стойка для капельницы**

Изготовлен нержавеющей сталью, грузоподъемность: 15 кг.





ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ



Дизайн



Исследование



Производство



Обслуживание



Услуга



ФИЛИАЛЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited

DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
КОД АКЦИИ: 870098

📍 No. 35, Lehong Роуд · Чжанцзяган (Цзянсу) · Китай

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Видео компании



Общий каталог