



V3k

РУЧНАЯ КРОВАТЬ



SAIKANG / Medical

Оздоровим
вашу жизнь

V3k

ОСОБЕННОСТИ



Технические параметры

▪ Габариты (Д*Ш)	2130x995 mm
▪ Платформа матраса	1925x900 mm
▪ Макс. Нагрузка	200 kg
▪ Регулировка высоты	420-730 mm
▪ Регулировка спинки	0-70° (±5°)
▪ Регулировка наколенника	0-38° (±5°)

Опция

- Авторегрессия (Спинная секция)
- Полка для предметов
- Дуга вытягивания

Техническая фигурация

<input checked="" type="checkbox"/> Ручная рукоятка	3 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> 5" Двойные боковые колеса	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Складные боковые ограждения	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> PP изножье с замком и бамперными колесами Ф65	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Платформа кровати из полипропилена со встроенным фиксатором матраса	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> 4-крюковая стойка для капельницы	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Резервные отверстие для стойки капельницы	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Крюк для дренажного пакета	2 шт.

Цвет по заказу (Мин. Кол. 100 шт.)



Контроль качества

Компания SAIKANG медико являясь пионером в направлении медицинских мебели. Для обеспечения безопасности и надежности своей продукции, SAIKANG всегда строго выбирает фирменных поставщиков и применяется ботизированную сварку, автоматическое эпоксидное покрытие, эффективную сборочную линию выделенными операторами -- все только для гарантии качества SAIKANG.



Дизайн

Уникальная конструкция, не содержащая микробов, соответствует строгим требованиям больниц к инфекционному контролю. Бесшовные полипропиленовые изголовье изголовья и изножья, обеспечивают мгновенную и достаточную стерилизацию.



Сталь | Сварка

Baosteel, одна из 500 крупнейших компаний мира. Автоматическая сварка гарантирует полные плавные сварки.



Пластические части | Покраска

Экологический пластик можно стерилизовать при температуре 100 ° C, прочность на растяжение до 30 Мпа. Процедур порошкового крашения состоит на 11 этапов, толщина напыления 0,12 мм, яркость 60°, ударопрочность 50 кг.

Аксессуары



Каркас

Интегрированная платформа кровати P P, использующая передовые технологии производства.

платформа 4-5 секций, обеспечивает независимую установку и простое обслуживание.

Увеличенная площадь сиденья при подняты задней части, обеспечивая больше комфорта для пациентов.

Уменьшить вдавливание губки в панель сиденья.



Калесо

5" боковые колеса с центральным замком. TPR материал, ходьба 10 км без износа, корпус колеса с защитой от намотки, без винта, прецизионная конструкция.

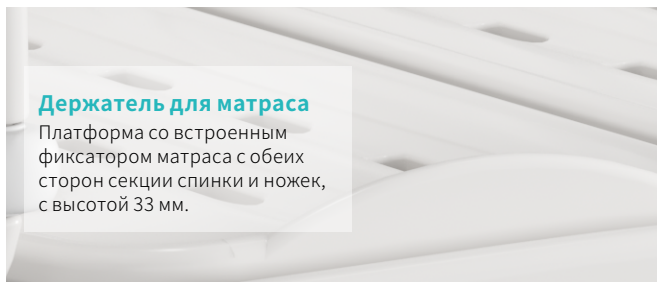
Нагрузка 200 кг, столкновение с препятствиями 4000 раз без деформации или повреждений.

Изголовье и изножье

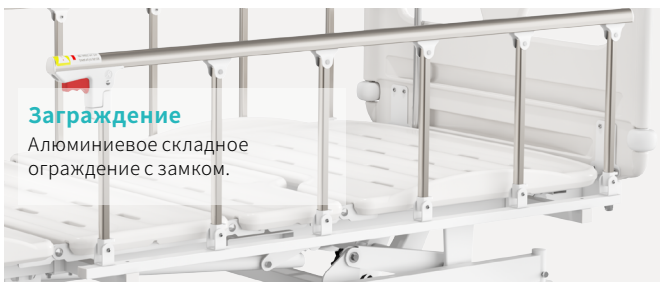
Материал LG Chem fresh PP, вставляемый тип. Оснащен бамперным колесом диаметром 65 мм, предотвращающим столкновение.

**Держатель для матраса**

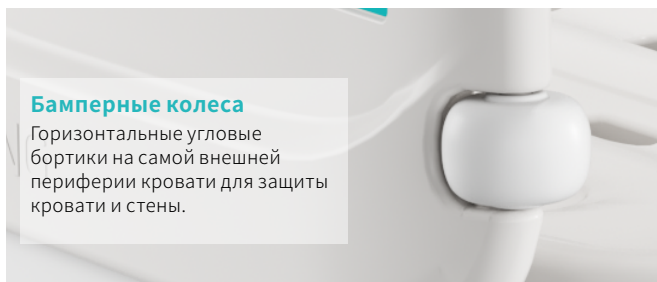
Платформа со встроенным фиксатором матраса с обеих сторон секции спинки и ножек, с высотой 33 мм.

**Заграждение**

Алюминиевое складное ограждение с замком.

**Бамперные колеса**

Горизонтальные угловые бортики на самой внешней периферии кровати для защиты кровати и стены.

**Крючек для дренажного пакета**

Пластичный дренажный крюк, подвижный

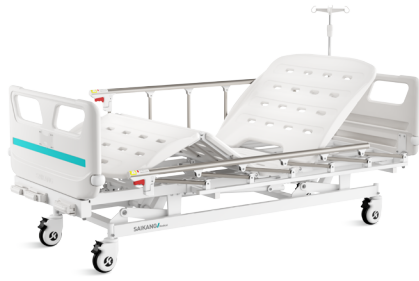
**Стойка для капельницы**

Изготовлен нержавеющей, грузоподъемность: 15 кг.



Регулировка спинки

70°



Регулировка наколенника

38°



Регулировка высоты

420-730 mm



ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ



Дизайн



Исследование



Производство



Обслуживание



Услуга



ФИЛИАЛЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited

DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
КОД АКЦИИ: 870098

📍 No. 35, Lehong Роуд · Чжанцзяган (Цзянсу) · Китай

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Видео компании



Общий каталог