



Серия Oasis

Y8y

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ICU КРОВАТЬ



SAIKANG / Medical

Оздоровим
вашу жизнь

У8у8с

ОСОБЕННОСТИ



Технические параметры

▪ Габариты (Д*Ш)	2130x1050 mm
▪ Платформа матраса	1925x880 mm
▪ Макс. Нагрузка	250 kg
▪ Регулировка высоты	350-800 mm
▪ Регулировка спинки	0-75° (±10°)
▪ Регулировка наколенника	0-35° (±10°)
▪ Обратный Тренделенбург	0-16°
▪ Тренделенбург	0-16°
▪ Указатель угла	0-90°
▪ Авторегрессия	100+60 mm
▪ Линия положения	30°

Преимущества

- ★ Авторегрессия
- ★ Сверхнизкое положение кровати 350 мм
- ★ Каркас изготовлен из PP, моющийся и съемный
- ★ PP изголовья и изножья однокнопочная разборка с надежным замком, запатентованный дизайн
- ★ Защитное ограждение из полипропилена с двухступенчатой системой разблокировки, запатентованный дизайн
- ★ Положение спинки сиденья на 30 градусов, снижает вероятность легочной инфекции
- ★ Встроенный светодиодный светильник

Техническая фигурация

<input checked="" type="checkbox"/> Линейный мотор	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> 5" Двухсторонние колеса с центральным управлением	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> ABS Oasis Боковое ограждение с дополнительной высотой	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> ABS Oasis изголовья и изножья с замками	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Каркас изготовлен из PP, моющийся и съемный	9 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Пластиковая кармана внутри полипропиленового ограждения для телефона или очков	2 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Запатентованный индикатор угла наклона спинки и положения тренделенбурга	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Колесо бампера Ф70mm	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Стойка для капельницы	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Резервные отверстие для стойки капельницы	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Крюк для дренажного пакета	2 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Педаль центрального замка	2 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Стоппер для матраса из АБС-пластика	2 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Ручной контроллер	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Ручное CPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Электрическое CPR	

Опция

<input type="checkbox"/> Система взвешивания
<input type="checkbox"/> Удлинение кровати на 20 см
<input type="checkbox"/> Резервная батарея
<input type="checkbox"/> Пульт для персонала
<input type="checkbox"/> Кнопка аварийной остановки
<input type="checkbox"/> Положение кардиологического кресла
<input type="checkbox"/> Направляющее колесо
<input type="checkbox"/> 5-я и 6-я дополнительные боковые заграждения для 100% полной защиты
<input type="checkbox"/> Дуга для вытягивания
<input type="checkbox"/> Балканский каркас
<input type="checkbox"/> Держатель для хранения
<input type="checkbox"/> Одна кнопка для положения мобилизации пациента
<input type="checkbox"/> Положение для ухода с одной кнопкой
<input type="checkbox"/> Индикатор низкой позиции

Легкая мобилизация пациентов


Одна кнопка для положения мобилизации пациента - задняя панель поднята, конструкция с двойным отверстием на ограждении задней части, которое поддерживает самостоятельное положение пациента.

**Заграждение**

Спроектированное ограждение полностью продумано таким образом, чтобы обеспечить пациенту достаточно места и хватки для рук, чтобы он мог встать с кровати, и обеспечить чрезвычайно высокую безопасность. Двухступенчатая система разблокировки, предотвращающая случайное опускание пациентами ограждения (запатентованная конструкция).

**Авторегрессия**

Авторегрессия 10+6 см
При изменении положения спинки и ножной секции, каркас спиной части возвращает на заднюю сторону на 10 см, а бедренная часть в прежнюю сторону - на 6 см, чтобы свести к минимуму давление и силы сдвига в области таза пациента. Это приводит к значительному уменьшению развития пролежней.

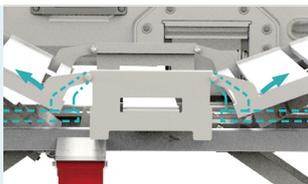**Мотор**

В соответствии со стандартами UL / ROHS / EN. Уровень Шума Менее 50 дБ, сроки службы : 20 000 Разовых движениях.

**Безопасности**

Однокнопочный выключатель аварийной остановки может быстро остановить все происходящее движение.

**CPR**

Ручка CPR расположена с обеих сторон кровати, легко доступна и далеко видно.

**Колеса**

TPR материал, прохода 30 км без износа, корпус колеса с защитой от наматки, без винта, прецизионная конструкция
Нагрузка 120 кг, прогулка 30 км, столкновение с препятствиями 500 раз без деформации или повреждений.

**Тормозная система**

Тормозная пружина сохраняет квалификацию после 10 000 непрерывных перерывов.

**ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗ ШВОВ**

Съемные пластиковые крышки, сформированные из 9 съемных выдувных ламелей, сводит к минимуму щели, в которых могут прятаться нежелательные инфекции.

**Угольный индикатор**

Запатентованный индикатор угла наклона, четко показывающий положение спинки и тренделенбурга.

**Съемные изголовье и изножье**

Запатентованная конструкция съемные изголовье и изножье, использующая эксцентричную фиксирующую конструкцию, быстро снимается в один шаг.

**Удлинение кровати**

Возможно удлинения платформы кровати до 20 см, удобная для высокорослых пациентов (опция).

**Бамперное колесо**

Горизонтальные угловые бортики на самой внешней периферии кровати для защиты кровати и стены.

**Крюк для дренажного пакета**

Пластичный дренажный крюк, подвижный.

**Стойка для капельницы**

Изготовлен нержавеющей, грузоподъемность: 15 кг.



Ручной контроллер

Ручной контроллер для пациентов и персонала, эргономичный дизайн. Встроенный светодиодный фонарик, клавиатура с подсветкой для использования в ночное время.



Система взвешивания



Ночная лампа



Повесенный пульт управления




Одна кнопка для положения мобилизации пациента - задняя панель поднята, конструкция с двойным отверстием на ограждении задней части, которое поддерживает самостоятельное положение пациента.



Положение для удобного ухода: 800мм удобно для лечения и ухода.



Индикатор низкой позиции

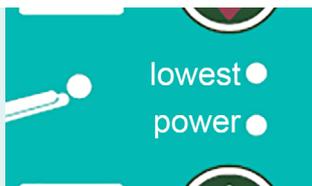

Положение тренделенбурга с одной кнопкой, способствующее максимально быстрому спасению.





ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ



Дизайн



Исследование



Производство



Обслуживание



Услуга



ФИЛИАЛЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited

DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
КОД АКЦИИ: 870098

📍 No. 35, Lehong Роуд · Чжанцзяган (Цзянсу) · Китай

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Видео компании



Общий каталог