



# СКВ041-3

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ  
ПАЦИЕНТОВ



**SAIKANG** / Medical

Оздоровим  
вашу жизнь

# SKB041-3

## ОСОБЕННОСТИ



Регулировка спинки



Регулировка наколенника



Регулировка высоты



Обратный Тренделенбург



Тренделенбург

### Технические параметры

▪ Габариты (Д*Ш)	2100x850 mm
▪ Регулировка высоты	630-930 mm
▪ Регулировка спинки	0-75° (±10°)
▪ Регулировка наколенника	0-45°
▪ Обратный Тренделенбург	0-15°
▪ Тренделенбург	0-15°



### Техническая фигурация

<input checked="" type="checkbox"/> Гидравлический насос	2 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Ручная рукоятка	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Пневматическая пружина для спинки	2 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> 6-дюймовые центроуправляемые колеса	4 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Складная ручка	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Педаль направленного колеса	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Складные боковые ограждения	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Колесо бампера Ф74mm	4 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Стойка для капельницы	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Резервное отверстие для стойки капельницы	4 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Матрас	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Педаль тормоза с центральным замком	2 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Направленное колесо с педалью разблокировки	2 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Рентгеновская полупрозрачная кровать-платформа	1 шт.



**Сталь | Сварка**

Baosteel, одна из 500 крупнейших компаний мира.  
Робот Panasonic обеспечивает полную плавную сварку на 360°.

**Пластические части**

Экологический пластик можно стерилизовать при температуре 100 ° C, прочность на растяжение до 30 Мпа.

**Покраска | цвет на выбор**

Процедур порошкового крашения состоит на 11 этапов, толщина напыления 0,12 мм, яркость 60°, ударопрочность 50 кг.

**Торможения**

Испытание тормозных деталей: после непрерывного выполнения торможения на 10 000 раз, функция тормоза в хорошем состоянии.

**Гидравлический насос**


Подъем спинки: через газовую пружину  
Регулировка высоты, Обратный тренделенбург и Тренделенбург: с помощью двух американских гидравлических насосов.

**Центральное колесо**

Может управлять направление, позволяя пользователям легко перемещаться по носилкам в напряженных и динамичных условиях.

**Поднимающийся**

Гидравлическая педаль для подъема.

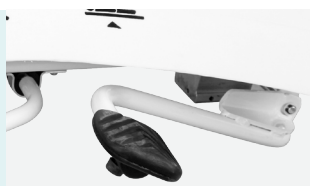**Падающий**

① Ножная секция опускается вниз, чтобы сделать голову выше.  
② Задняя часть опускается вниз, чтобы сделать ножную часть выше.  
③ Нажмите на середину педали, чтобы основание кровати равномерно опускалось вниз.

**Колеса**

Четыре 8" колёс, которые одновременно запираются стальной педалью с обеих сторон. Направляющее колесо помогает медицинскому персоналу легко толкать тележку, чтобы двигалась прямо одним человеком.

**Полосы**

Две реми предотвращает смещения пациента.

**Заграждение**

Складное алюминиевое ограждение.

**Бампер**


Съемное колесо бампера, максимальная защита кровати и пациента при транспортировке.

**Крюк для дренажного пакета**

Пластичный дренажный крюк, подвижный.

**Стойка для капельницы**

Нержавейка, грузоподъемность: 15 кг.

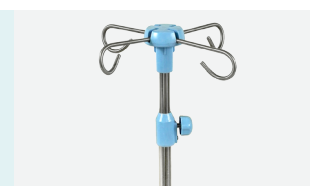





## ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ



Дизайн



Исследование



Производство



Обслуживание



Услуга



## ФИЛИАЛЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

### South America Branch

#### Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina  
TEL: +55 (11) 2758-0438  
Rua Universal, Hollywood,  
São Bernardo do Campo,  
Brazil  
TEL: +55 (11) 2758-0438

### East Africa Branch

#### Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,  
upper hill, nairobi, Kenya  
TEL: +254714084806

### South East Asia Branch

#### Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict  
Thawi  
Watthana District  
Bangkok Thailand  
TEL: +66 642741046

### UK Branch

#### Uk Healthward International Limited

DEPT 111,  
196 High Road Wood Green,  
London, N22 8HH  
United Kingdom  
TEL: +31 (0) 202111106

### Russia Branch

#### LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,  
Chelyabinsk,  
Universitetskaya  
Naberezhnaya, Russia  
TEL: +7 (919)300-00-06

### Mid East Branch

#### Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah  
P.O Box 53200, Abu Dhabi,  
UAE  
Tel: +971 585710652

# SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.  
КОД АКЦИИ: 870098

📍 No. 35, Lehong Роуд · Чжанцзяган (Цзянсу) · Китай

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Видео компании



Общий каталог